


Adapt Anneau Protecteur Convexe Ovale

Accessoire

L'anneau protecteur convexe Adapt permet de :

- renforcer l'étanchéité entre la stomie et l'appareillage,¹
- prévenir les risques de fuites,¹
- appareiller des stomies - ovales,
 - planes, invaginées, rétractées ou dans un pli,
 - situées sur un abdomen ferme, mou ou flasque.

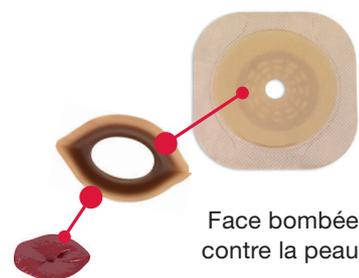

Comment les utiliser ?

Chauffez le protecteur cutané entre vos mains et enlevez les films de protection, en commençant par le film blanc.

- 1 Positionnez l'anneau protecteur convexe directement sur le support (système 2 pièces) ou sur la poche (système 1 pièce), **face plane sur l'appareillage**, en l'ajustant à la découpe.
- 2 Appliquez l'ensemble de l'appareillage du bas vers le haut en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de plis cutanés pour éviter tout risque de fuite.
- 3 Maintenez fermement l'ensemble de l'appareillage quelques secondes.



Questions fréquemment posées

Est-ce que l'on peut étirer l'anneau ?	Il n'est pas recommandé d'étirer l'anneau car il a une forte mémoire de forme.
Est-ce que je peux positionner la face plane de l'anneau directement sur la peau ?	Non. L'anneau doit être positionné face convexe autour de la stomie sinon il perd l'intérêt de la convexité. Positionnez toujours la surface plane de l'anneau sur le support de l'appareillage.
Puis-je utiliser ces anneaux sur des supports plans et convexes ?	Oui. Sur des supports plans une convexité souple modérée est obtenue. Sur des supports convexes, on obtient une convexité ferme profonde. Demandez conseil à votre infirmier(ère) stomathérapeute.
Puis-je empiler, couper les anneaux ?	Oui. Pour un joint plus doux entre les deux anneaux coupés, vous pouvez utiliser quelques pointes de Pâte Adapt.
Puis-je utiliser les anneaux sur une peau endommagée, irritée, suintante ?	Oui. Utilisez un peu de Poudre Adapt pour aider à la cicatrisation et absorber l'humidité d'une peau suintante. Appliquez ensuite l'appareillage.

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67 Service & appel gratuits

assistance.conseil@hollister.com

1. Notice d'instructions des anneaux protecteurs convexes Adapt Anneaux protecteurs conçus pour améliorer l'ajustement d'un appareillage de stomie. Ce produit est un accessoire pour un appareillage de stomie destiné à prévenir les fuites d'effluents sous le protecteur cutané. :

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr

Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I. Fabriqués par Hollister Incorporated. Ces dispositifs médicaux portent, au titre de la réglementation, le marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur (maximum 30°C) et de l'humidité, dans son emballage d'origine. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : dec 2017. Référence: FRO204




Adapt Anneau Protecteur Convexe Rond

Accessoire

L'anneau protecteur convexe Adapt permet de :


- renforcer l'étanchéité entre la stomie et l'appareillage,
- prévenir les risques de fuites,
- appareiller des stomies - rondes ou irrégulières,
 - planes, invaginées, rétractées ou dans un pli,
 - situées sur un abdomen ferme, mou ou flasque.

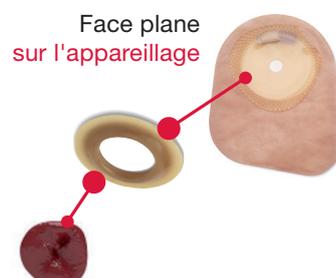

Comment les utiliser ?

Chauffez le protecteur cutané entre vos mains et enlevez les films de protection, en commençant par le film blanc.

- 1 Positionnez l'anneau protecteur convexe directement sur le support (système 2 pièces) ou sur la poche (système 1 pièce), **face plane sur l'appareillage**, en l'ajustant à la découpe.
- 2 Appliquez l'ensemble de l'appareillage du bas vers le haut en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de plis cutanés pour éviter tout risque de fuite.
- 3 Maintenez fermement l'ensemble de l'appareillage quelques secondes.

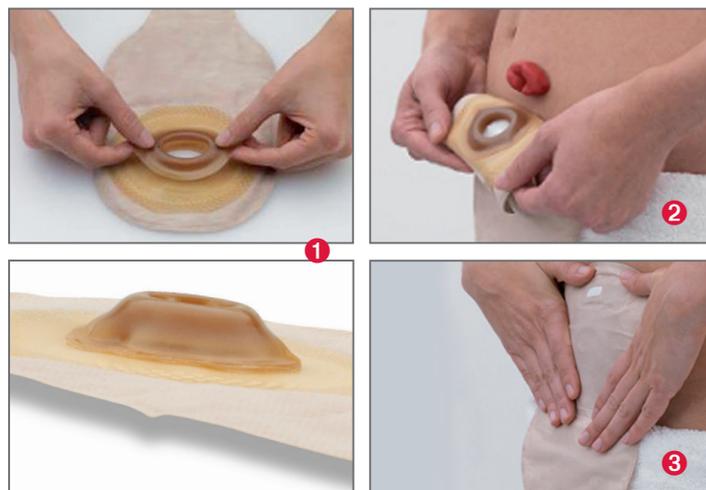

Questions fréquemment posées

Est-ce que l'on peut étirer l'anneau ?	Il n'est pas recommandé d'étirer l'anneau car il a une forte mémoire de forme.
Est-ce que je peux positionner la face plane de l'anneau directement sur la peau ?	Non. L'anneau doit être positionné face convexe autour de la stomie sinon il perd l'intérêt de la convexité. Positionnez toujours la surface plane de l'anneau sur le support de l'appareillage.
Puis-je utiliser ces anneaux sur des supports plans et convexes ?	Oui. Sur des supports plans une convexité souple modérée est obtenue. Sur des supports convexes, on obtient une convexité ferme profonde. Demandez conseil à votre infirmier(ère) stomathérapeute.
Puis-je empiler, couper les anneaux ?	Oui. Pour un joint plus doux entre les deux anneaux coupés, vous pouvez utiliser quelques pointes de Pâte Adapt.
Puis-je utiliser les anneaux sur une peau endommagée, irritée, suintante ?	Oui. Utilisez un peu de Poudre Adapt pour aider à la cicatrisation et absorber l'humidité d'une peau suintante. Appliquez ensuite l'appareillage.

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67 Service & appel gratuits

assistance.conseil@hollister.com

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr

Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I. Fabriqués par Hollister Incorporated. Ces dispositifs médicaux portent, au titre de la réglementation, le marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur (maximum 30°C) et de l'humidité, dans son emballage d'origine. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : dec 2017. Référence: FRO204

CE